

KineMind

Rehabilitación neurocognitiva
e motora inmersiva



KineMind combina realidad virtual y retroalimentación háptica para ayudarte a mejorar tu memoria y coordinación motora de una forma interactiva y motivadora.



Entrenamiento
cognitivo



Ejercicios
motores




Retroalimentación
háptica inmediata

1. COMPONENTES DEL SISTEMA




Visor de
realidad virtual

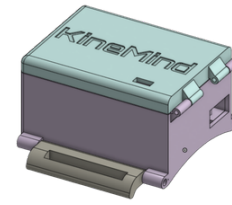

Banda háptica

2. COLOCACIÓN DE LA BANDA

- 1 Coloca las bandas en los puntos referenciados.
- 2 Ajusta las correas para que quede firme y comodo.

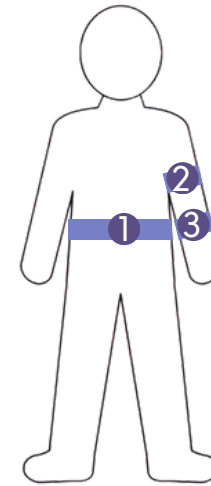

3. ENCENDIDO Y CONEXIÓN



Mueve el switch
de encendido de
las bandas.



Presiona el boton
de encendido del
visor.



Conecta por
Bluetooth el visor y
las bandas.

4. CALIBRACIÓN DE LAS BANDAS



En el visor de realidad virtual, abra la aplicación KineMind.

Espere a que cargue el entorno virtual y aparezca el menú principal.

Camine hacia el panel principal del entorno virtual.

Seleccione Calibrar para iniciar la calibración de la banda háptica.


4. ¿CÓMO FUNCIONA?

1 Nivel 1 – Memoria de secuencias

Observe la secuencia de figuras que aparecerá en la pantalla.

Memorice el orden en el que las figuras son mostradas.


Las figuras aparecerán nuevamente de forma aleatoria.

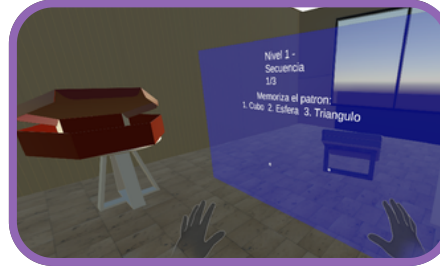

2 Usuario ordenar la secuencia.

Seleccione las figuras y colóquelas de izquierda a derecha en las casillas, respetando la secuencia.

Al finalizar la tercera secuencia, el sistema avanzará automáticamente al Nivel 2.

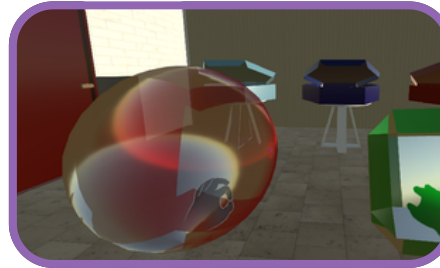

3 Nivel 2 – Dibujo y coordinación motora

Lea las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

Busque el birrete virtual dentro del entorno.


Al seleccionar el birrete, se iniciará automáticamente la actividad de dibujo.



4 Usuario dibuja siguiendo los puntos


Siga el recorrido uniendo los puntos con el movimiento de la mano.

Mantenga el trazo dentro de la trayectoria indicada hasta completar la figura.

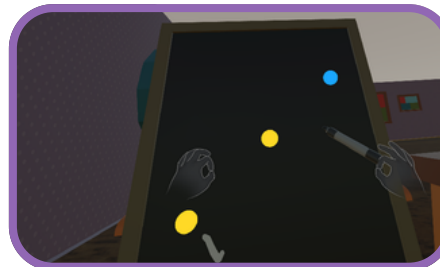

5 Vibración háptica

Si durante el recorrido se detecta un error, la banda háptica emitirá una vibración como retroalimentación inmediata.

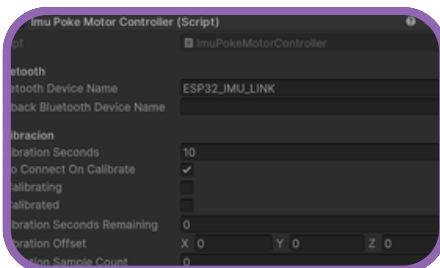

6 Finalización

Al concluir ambos niveles, el sistema mostrará el mensaje "....".

Retire el visor de realidad virtual y la banda háptica.

